

SOLUCIONES PARA

cardiva®

EL MANEJO DE LAS HERIDAS

Reoxcare

UN NUEVO ENFOQUE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS



Reoxcare Gel



Reoxcare Apósito

histocell
REGENERATIVE MEDICINE

DEBRICHEM®

UN NUEVO MÉTODO DISRUPTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DEL BIOFILM

DEB^X
MEDICAL



DEBRICHEM®

DEBRICHEM® es un gel ácido certificado como dispositivo médico de un solo uso.

El producto está destinado a su aplicación tópica sobre una herida infectada, para ayudar en la eliminación de la infección mediante desbridamiento, seguido de una limpieza y vendaje de la misma.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

DEBRICHEM® seca el biofilm, así como los microorganismos presentes, en 60 segundos tras su aplicación.

Al capturar instantáneamente las moléculas de agua de cualquier tipo de material biológico expuesto, DEBRICHEM® tiene un efecto deshidratante, con un daño mínimo del tejido vital situado bajo el lecho de la herida.

Una vez que el biofilm y sus microorganismos han sido destruidos, la reacción inmunitaria necesaria para el proceso normal de cicatrización de la herida se reinicia.

Después de la exposición a DEBRICHEM®, el biofilm desecado se precipita y coagula.

Finalmente, este material no viable se separa de la superficie sana subyacente con el tiempo, por desprendimiento espontáneo.

Elimina el biofilm
y la infección

Aplicación
única

Fácil de usar
(60 segundos)



TRATAMIENTO DE DESBRIDAMIENTO CON DEBRICHEM®




1. Póngase guantes y gafas de protección



2. Retire el apósito existente que cubre la herida




3. Enjuague la herida y periherida con solución salina

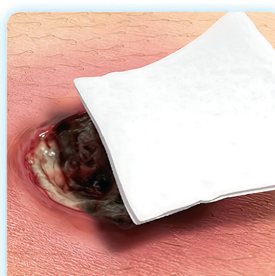

4. Limpie y seque la superficie de la herida con una gasa seca estéril



5. Si es necesario, aplique un analgésico tópico y retírelo una vez alcanzado el efecto anestésico

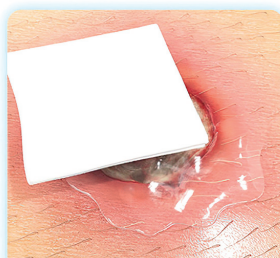

6. Asegúrese de retirar el analgésico antes de aplicar DEBRICHEM®



7. Agite el vial antes de abrirlo



8. Abra el vial y retire el tapón (rosca)




9. Aplique una cantidad generosa del producto sobre el lecho de la herida y deje actuar 60 segundos como máximo




10. Extienda DEBRICHEM® uniformemente sobre la herida, aplicando una ligera presión con el dedo (protegido con guantes)




11. Cubra completamente el lecho de la herida y la periherida

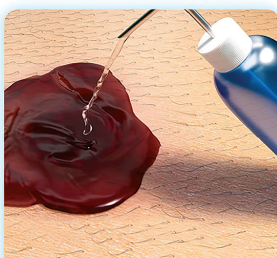


12. Después de 60 segundos, enjuague la herida y periherida con abundante solución salina

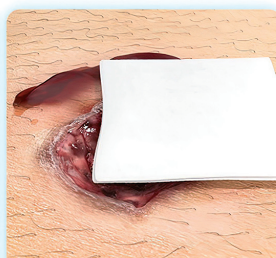

13. Limpie y retire los residuos sobrantes con una gasa seca estéril

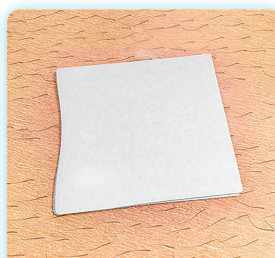

14. Seque bien la herida con una gasa estéril

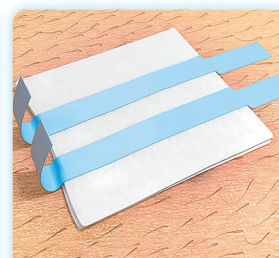

15. Proteja la herida siguiendo sus cuidados habituales

REOXCARE GEL

¿Qué es Reoxcare Gel?

Hidrogel activo que proporciona una defensa frente a los radicales libres presentes en el entorno de la piel dañada y en las heridas.

¿Qué aporta Reoxcare Gel?

- Gran capacidad antioxidante
- Hidrata la piel
- Efecto filmógeno
- Aporta oligoelementos esenciales para los mecanismos celulares




INGREDIENTES ANTIOXIDANTES DE ORIGEN NATURAL



LBG (galactomanano)

Obtenido de la molienda de las semillas del algarrobo. Referente en la medicina tradicional por sus propiedades antioxidantes y muy calmantes.

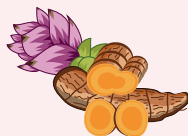

Cúrcuma

Fuente de vitaminas y minerales. Previene la oxidación de los tejidos y proporciona una defensa frente al ambiente inflamatorio.



Licopeno*

Caroteno natural, neutralizador directo de los radicales libres más abundantes presentes en el estrés oxidativo. Bloqueante de la cascada oxidativa.



Ácido ascórbico*

Micronutriente esencial para la cicatrización de heridas. Necesario para la síntesis y estabilización del colágeno, proporcionando fuerza y resistencia al nuevo tejido formado.



α-Tocoferol*

Reconocido antioxidante natural. Reduce la formación de radicales libres y protege las membranas celulares.

*Excipientes

¿CÓMO UTILIZAR REOXCARE GEL?

1

Limpiar la herida cuidadosamente

2

Aplicar Reoxcare Gel en el área cada 24/48 horas hasta la recuperación completa

3

Cubrir si es necesario



Reoxcare Gel puede ser utilizado por el propio paciente

*No utilizar si el envase original está abierto o dañado.

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

EXCELENTES RESULTADOS CLÍNICOS



Reduce la inflamación, la irritación y el dolor



Capacidad de desbridamiento autolítico



Protege la piel tanto intacta como dañada




Mayor capacidad de reparación de los tejidos y de cicatrización

REOXCARE APÓSITO

¿Qué es Reoxcare Apósito?

Tratamiento innovador de última generación con propiedades antioxidantes únicas que promueve el proceso natural de cicatrización de las heridas.

Su novedoso y patentado diseño es el resultado de años de investigación de Histocell en medicina regenerativa.

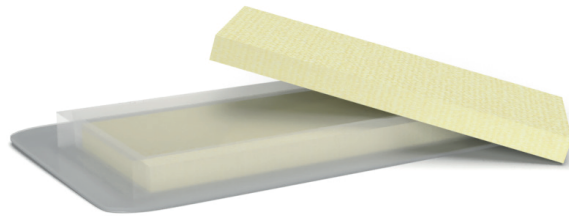


¿CÓMO FUNCIONA REOXCARE APÓSITO?

Reoxcare combina 2 componentes de origen natural para un óptimo cuidado de la piel.

Matriz 100% de origen vegetal con gran capacidad de absorción




Algarrobo

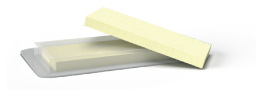

LBG (galactomanano)

Obtenido de la molienda de las semillas del algarrobo. Referente en la medicina tradicional por sus propiedades antioxidantes y muy calmantes.

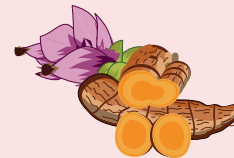

Cúrcuma

Fuente de vitaminas y minerales. Previene la oxidación de los tejidos y proporciona una defensa frente al ambiente inflamatorio.

Solución de hidratación con propiedades antioxidantes



Cúrcuma +
acetilcisteína



VENTAJAS

- Reoxcare es un tratamiento eficaz tanto en heridas agudas como crónicas.
- Evita la cronificación de las heridas.
- Activa la herida, obteniendo un lecho óptimo que permite el proceso natural de cicatrización.
- Tiene una excelente capacidad de desbridamiento, tanto osmótico como autolítico.
- Evita la interacción del biofilm en el proceso de cicatrización.

PROPIEDADES DE REOXCARE APÓSITO

Antioxidante

Neutraliza el exceso de radicales libres en el entorno, contribuye en el avance del proceso de cicatrización.

Desbridamiento

Facilita la eliminación de tejidos no viables presentes en el lecho de la herida.

Activación de la herida

Preparación del lecho, inducción del tejido de granulación y activación de los bordes.

Alivio del dolor

Las propiedades hidratantes y antioxidantes actúan combinadas para disminuir el dolor en la herida y su entorno.


Funcionamiento

Fácil de aplicar y retirar.

Biofilm

Evita que el biofilm interfiera en la evolución de la herida.


¿CÓMO UTILIZAR REOXCARE APÓSITO?

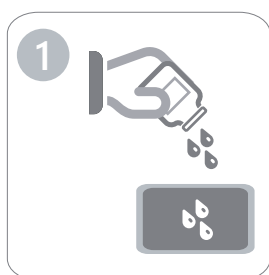


1 HIDRATAR LA MATRIZ CON LA SOLUCIÓN Y ESPERAR 1-2 MINUTOS



2 LIMPIAR LA HERIDA Y PROTEGER LA PIEL PERILESIONAL CON PELÍCULA BARRERA A CRITERIO DEL FACULTATIVO

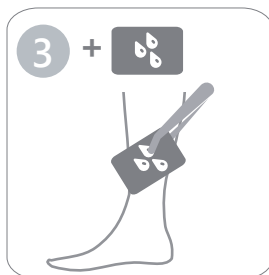

3 + RECORTAR LA MATRIZ PARA ADAPTARLA A LA FORMA DEL LECHO Y COLOCARLA EN CONTACTO DIRECTO CON LA HERIDA

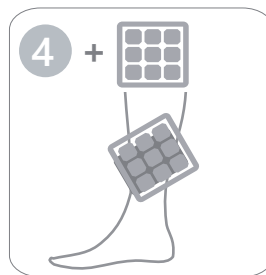

4 + CUBRIR CON UN APÓSITO SECUNDARIO DE CURA EN AMBIENTE HÚMEDO APROPIADO. CAMBIAR 2 VECES POR SEMANA (CADA 3-4 DÍAS)

**Es un producto de un solo uso. No utilizar si el envase original está abierto o dañado. No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.*


¿CUÁNDO USAR REOXCARE APÓSITO?

Reoxcare puede utilizarse en úlceras de diferente etiología como las de pie diabético, por presión, hipertensivas, venosas con compresión, isquémicas y por calciflaxis.

También puede utilizarse en dehiscencias quirúrgicas, quemaduras y heridas traumáticas.



Especialmente indicado en presencia de hueso o tendón expuesto

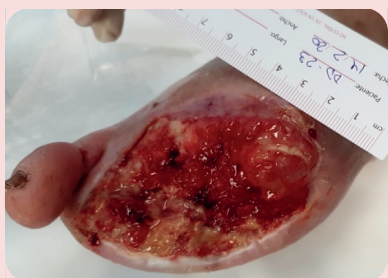

Induce la formación de tejido de granulación sobre tejido expuesto.




Se puede utilizar en presencia de tejido desvitalizado, contribuyendo a su eliminación.

DEBRICHEM®

¿POR QUÉ DEBRICHEM® NO AFECTA A LA PIEL SANA?

DEBRICHEM® tiene una fuerte acción higroscópica, que captura las moléculas de agua de cualquier tipo de material biológico. Dado que los biofilms están compuestos principalmente de agua, la reacción rápida desnaturaliza los constituyentes microbianos dentro del biofilm y elimina la infección.


Por el contrario, el tejido viable y la piel sana están protegidos por la membrana lipídica, expuestos por tanto a un menor contenido de agua. Esto protege la capa epidérmica de la piel circundante del efecto de desecación.

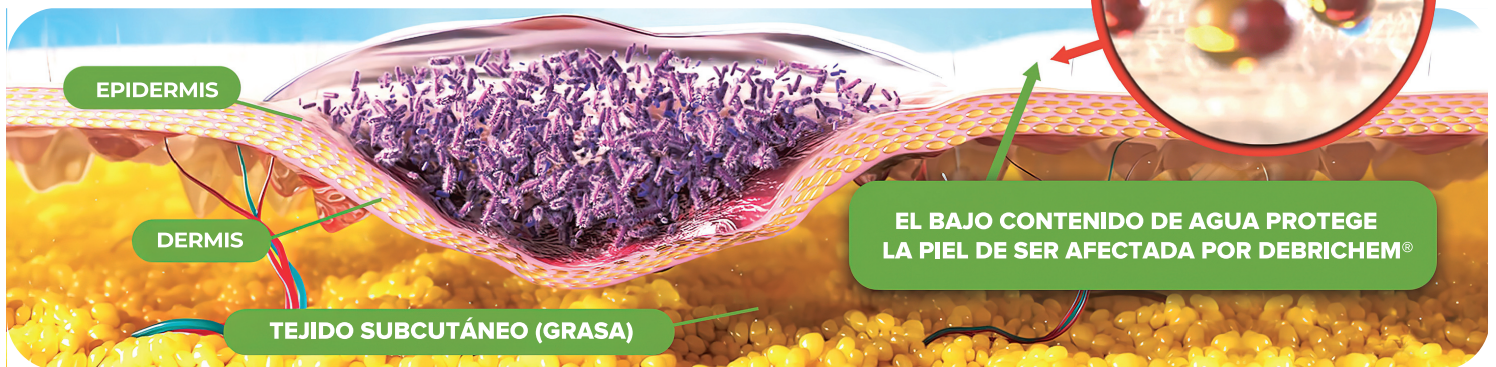


Reoxcare

ACCIÓN ANTIOXIDANTE


● Células inflamatorias ● Radicales libres

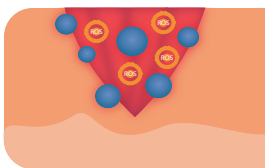


Las células inflamatorias producen radicales libres.

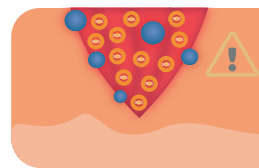

Cuando hay un exceso de radicales libres la cicatrización se detiene.

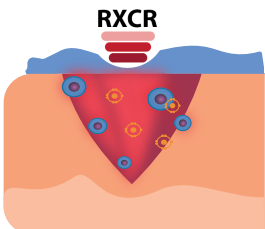

Reoxcare neutraliza el exceso de radicales libres manteniendo un ambiente húmedo.

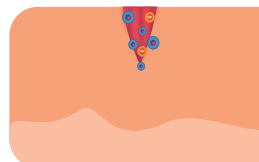

Y permite que los tejidos progresen hacia la cicatrización.

Distribuido por:

cardiva

www.cardiva.com

CARDIVA 2, S.L.

C/ Anabel Segura, 11, Edif. A – Planta 1ª

28108 Alcobendas (Madrid) España

T. +34 91 358 6110