




# iNedit

Catéter de acceso distal con balón

Un dispositivo innovador  
para garantizar el primer pase

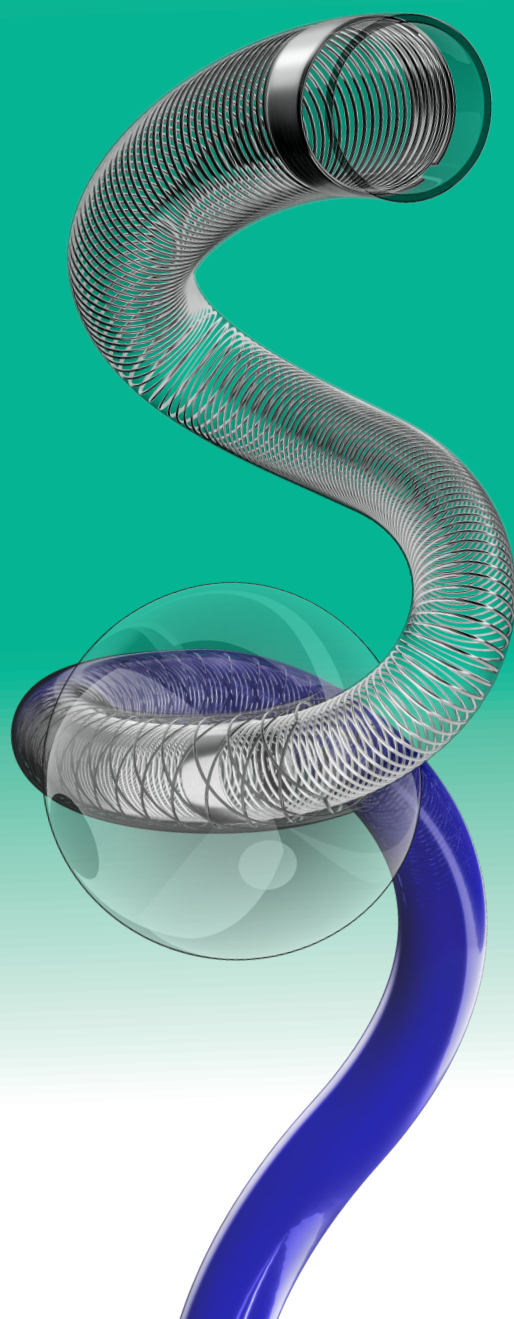

**iVascular**  
therapies for living

# iNedit, dispositivo único e innovador que con

**iNedit**, catéter coaxial formado por:

**Balón distensible ubicado  
a 5 cm de la punta del catéter**

**Doble lumen 6F hasta el balón y  
monolumen 5F distal al balón**

## Excelente navegabilidad gracias a:

Diseño que combina diferentes refuerzos  
de malla y coil:

- Ofrece un gran soporte sin acodarse en anatomías tortuosas
- Garantiza una gran capacidad de empuje y estabilidad

### **Hydrax Plus**

Recubrimiento hidrofílico,  
tecnología propia  
de iVascular




## Notable visibilidad

Marcadores radiopacos  
en el balón y la punta

# Combina el acceso con el bloqueo de flujo distal

**iNedit**, el dispositivo ideal que te ayudará en las trombectomías mecánicas aportándote:

- 1 Mayor soporte en la introducción de dispositivos gracias al hinchado del balón en la porción petrosa-cavernosa.
- 2 Facilidad en la extracción del trombo en el primer pase (M1 y M2) gracias a la reducción de la presión en la zona de extracción.
- 3 Minimización de la embolización distal evitando el colapso de la arteria carótida cervical.

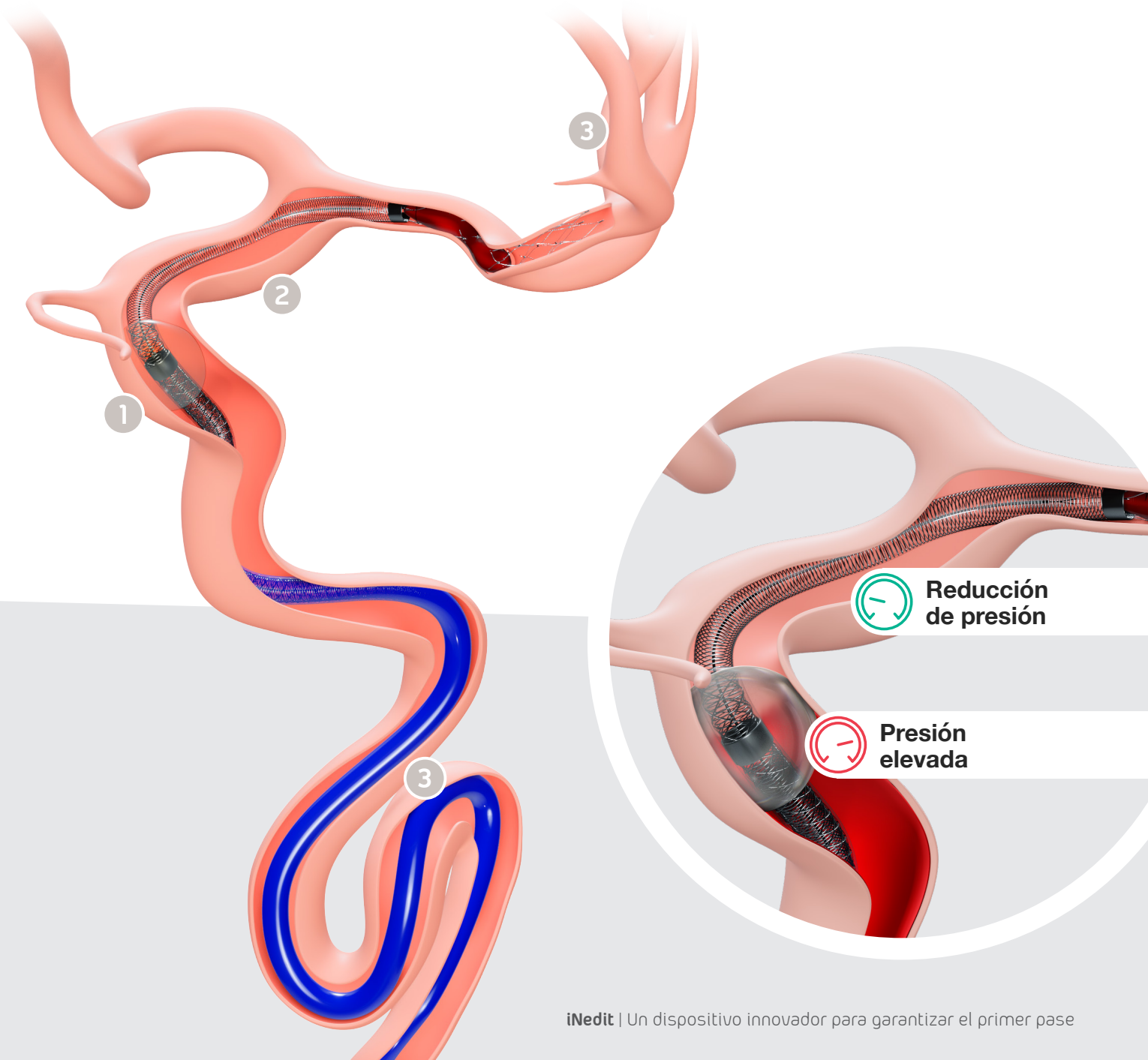


# iNedit características

- > Punta distal suave y atraumática
- > Diámetro de la punta 1,65 mm
- > Tiempo de desinflado: <30 s
- > Compatible con un catéter introductor 6F (ID mínimo = 0,088")
- > 2 marcadores radiopacos (balón y punta)
- > Capacidad de inyección de líquido de contraste
- > Presión máxima de infusión: 300 psi
- > Longitud efectiva total del catéter: 125 y 105 cm




- > El cuerpo distal del dispositivo, está recubierto con un recubrimiento hidrofílico duradero (Hydrax)
- > Catéter de doble lumen, hasta el balón

## Incluye

- Llave de paso de 1 vía
- Válvula hemostática corta con línea de extensión
- 2 vainas pelables

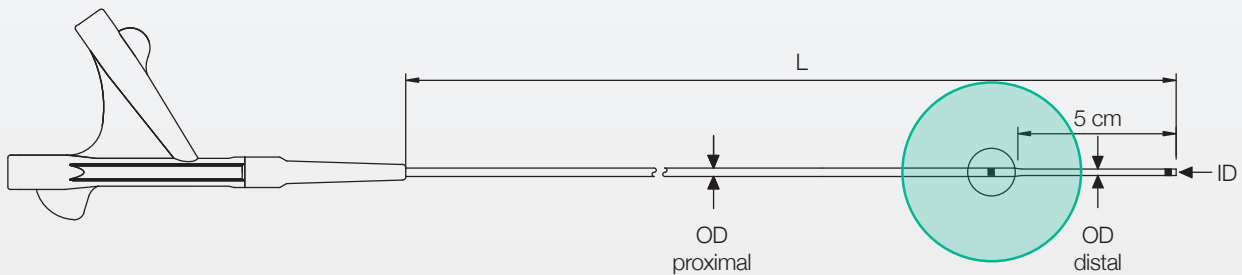

### Tras el purgado del balón

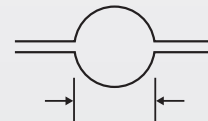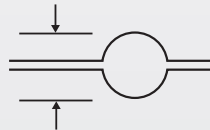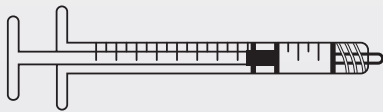

0,05 ml

5 mm

5 mm

0,10 ml

6 mm

6 mm

0,15 ml

7 mm

6 mm

0,20 ml

7 mm


7 mm

Producto con marca CE, certificado por el Organismo Notificado 0318

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN
DADNB105600	Catéter de acceso distal 6F con balón, longitud de 105 cm
DADNB125600	Catéter de acceso distal 6F con balón, longitud de 125 cm

La disponibilidad de cada referencia para la venta está vinculada a la autorización de comercialización en el país de destino

Distribuido por:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech S.L  
www.ivascular.global  
info@ivascular.global

**iVascular**  
therapies for living

