


iNtercept

Dispositivo extractor de trombo retriever


Diseñado para restablecer
el flujo sanguíneo

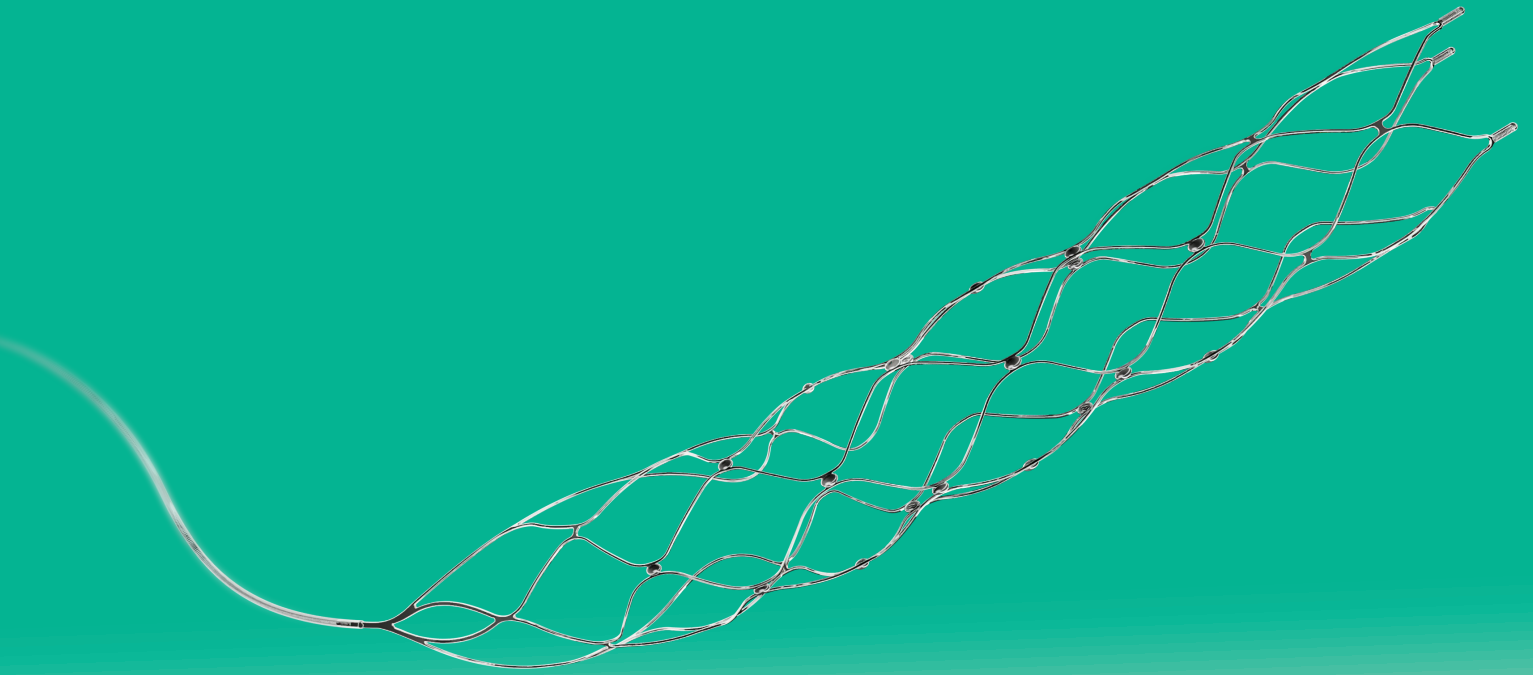


iVascular[®]
therapies for living

Precisión en la implantación


Excelente visibilidad con:

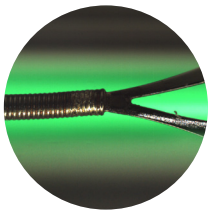

1 Marcador de oro proximal

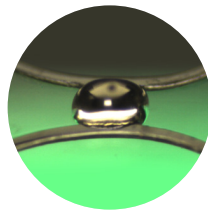

2 Marcadores centrales de oro dispuestos de forma helicoidal a lo largo de la cesta

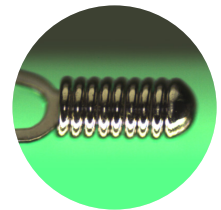

3 Marcadores distales de platino


Comprimido




Expandido



Marca central proximal que ayuda a posicionar el retriever respecto al trombo

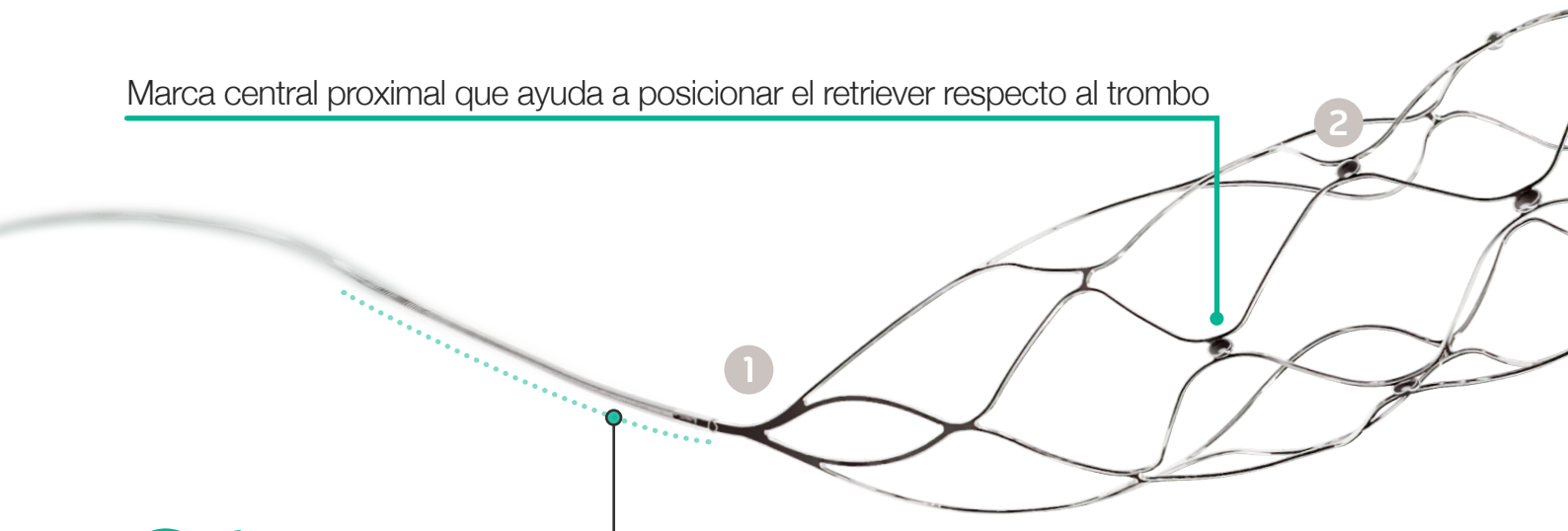


liberación y maximizar la recuperación del trombo

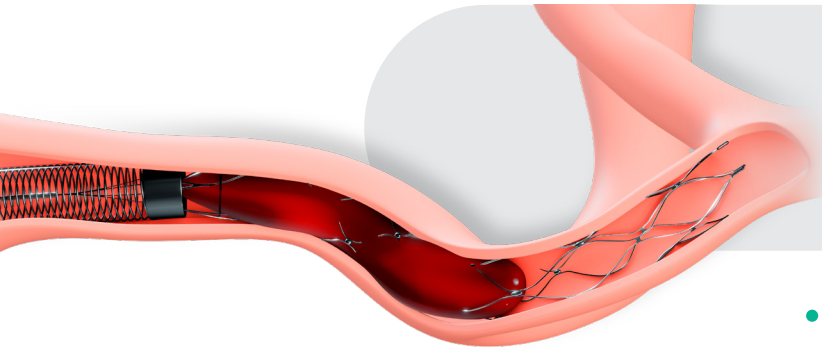


Excelente conformabilidad


- La abertura axial permite una gran adaptabilidad
- Las celdas cerradas garantizan el óptimo aposicionamiento en la retirada

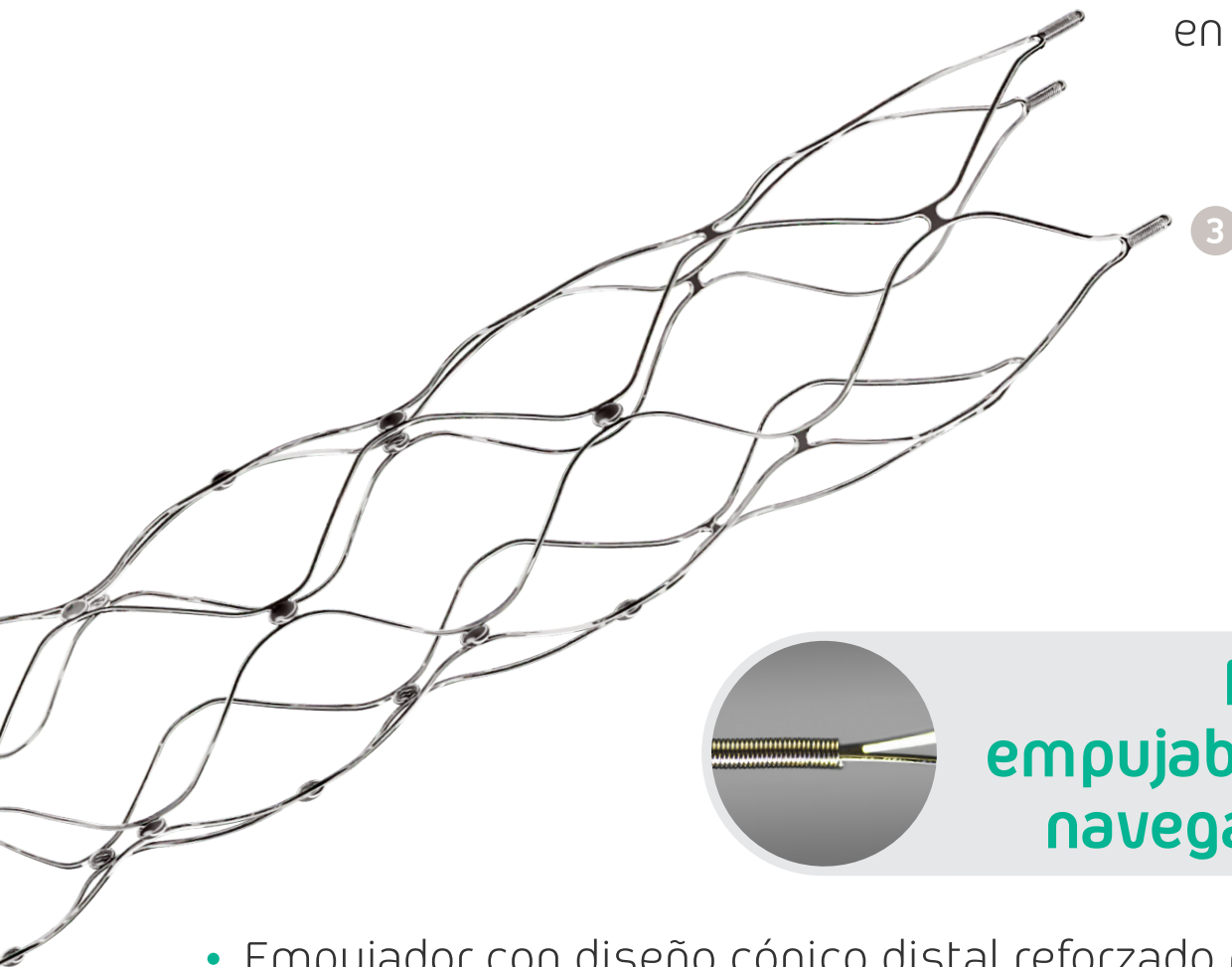

Notable empujabilidad y navegabilidad

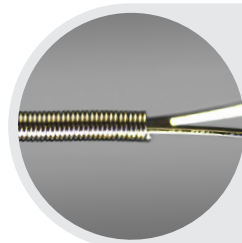

- Empujador con diseño cónico distal reforzado por un coil
- Dos empujadores diseñados para los diferentes vasos a tratar

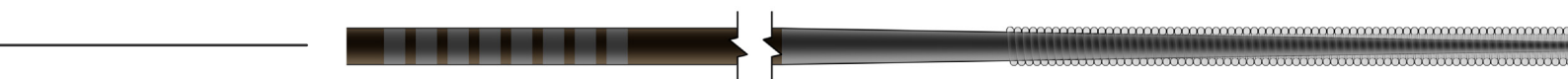


iNtercept características

- > Cesta de nitinol autoexpandible
- > Celdas cerradas
- > Marcadores radiopacos distales: coils de platino → 2 marcadores en el diámetro de 3 y 3 marcadores en el diámetro de 4 y de 6
- > Marcadores radiopacos centrales de oro a lo largo de la cesta

- > Marcador radiopaco proximal de oro en la unión entre la cesta y el empujador
- > Diseño cónico del empujador a nivel distal reforzado por un coil de acero inoxidable


Incluye

- Un rotor

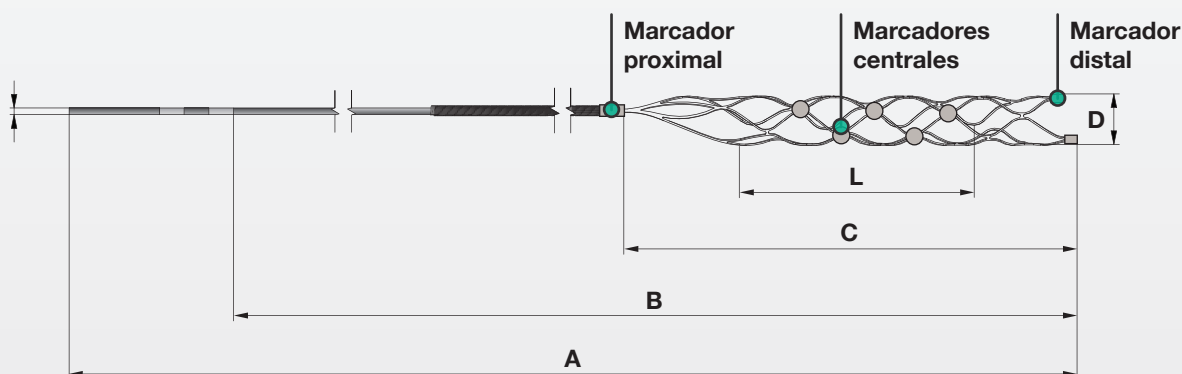


Producto con marca CE, certificado por el Organismo Notificado 0318
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)

iNtercept							
Referencias	DIMENSIÓN NOMINAL					Compatibilidad del microcatéter (pulgadas)	Arteria a tratar (Ø máximo) (mm)
	A (cm)	B (cm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)		
DETNS195030015	195	152	28	3	15	0,017	2,5
DETNS195030020	195	152	32	3	20	0,017	2,5
DETNS195040020	195	152	33	4	20	0,021	3,5
DETNS195040030	195	152	42	4	30	0,021	3,5
DETNS195060030	195	153	53	6	30	0,021 / 0,027	5,5
DETNS195060050	195	155	69	6	50	0,021 / 0,027	5,5

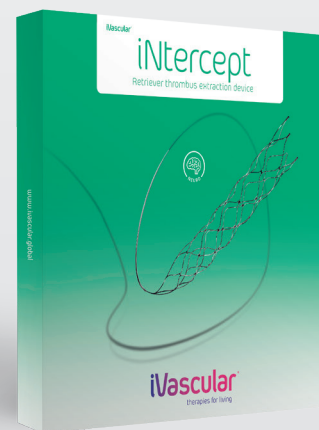

La disponibilidad de cada referencia para la venta está vinculada a la autorización de comercialización en el país de destino

Distribuido por:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech S.L
www.ivascular.global
info@ivascular.global